



InFace RF Beauty Instrument



Инструкция

1. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 1,5 секунд, чтобы включить устройство. Прозвучит звуковой сигнал.
2. Коротким нажатием переключайте три уровня интенсивности — высокий, средний и низкий. Каждый уровень сопровождается звуковыми сигналами и индикатором белого цвета.
3. В режиме включения нажмите и удерживайте кнопку в течение 1,5 секунд, чтобы выключить устройство. Прозвучит звуковой сигнал.
4. Благодаря функции интеллектуального таймера устройство автоматически выключается через 10 минут после включения.
5. С помощью функции автоматической памяти устройство автоматически сохраняет последний уровень интенсивности и использует его по умолчанию при следующем включении.



Длительное нажатие кнопки



Регулировка на три уровня

Методы использования



Движение от ключицы к челюсти (избегайте области горла)



Круговые движения от нижней челюсти к уху



Круговые движения от носогубных складок к скулам



Скольжение от внутреннего уголка глаза к внешнему уголку (избегайте касания глазного яблока и века)

Меры безопасности

- Не используйте прибор для области щитовидной железы или лимфатических узлов.
- Не применяйте прибор для горла, глазных яблок, ушей, верхних век, висков.
- Будьте осторожны при использовании прибора на участках с тонкой кожей и сосудами, таких как уголки глаз, лоб, шея, рот и область голени.
- Людям с чувствительной кожей рекомендуется использовать низкий уровень интенсивности.
- В течение одного часа до использования прибора не используйте горячие средства для ухода за кожей, такие как спирт, ацетон, парфюм, дезинфицирующее средство и т. д.
- Дополнительные меры предосторожности можно найти в руководстве пользователя.



Руководство по эксплуатации для клиентов интернет-магазина «Mi-Home»

InFace RF Beauty Instrument

Руководство пользователя

Введение

inFace RF Beauty Instrument — это безопасный, эффективный и простой в использовании прибор для ухода за кожей, который обеспечивает омолаживающий эффект и улучшает здоровье кожи. Как профессиональное устройство для красоты, прибор использует многополярную радиочастотную технологию для стимулирования выработки коллагена и других важных компонентов в коже, что помогает улучшить упругость и текстуру кожи, а также замедляет старение. Этот прибор является идеальным выбором для повседневного ухода за кожей.

* Примечание: Перед использованием продукта внимательно прочтите руководство.

Инструкции по безопасности

Все предупреждения и меры предосторожности должны быть соблюдены перед использованием любого электронного оборудования, все меры предосторожности должны быть прочитаны для обеспечения безопасности. Несоблюдение инструкций в этом руководстве может привести к ожогам или повреждению кожи.

Предупреждения

Важно!

1. Не используйте прибор для век, губ, ушей и т. д.
2. Запрещается использовать прибор в целях, отличных от предусмотренного функционального ухода.
3. Прибор заряжается только с помощью оригинального зарядного кабеля.
4. Если вы разобрали инструмент самостоятельно, не продолжайте его использовать.
5. Необходим гель для косметологического аппарата inFace RF предназначенный только для наружного применения.
6. Хранить в недоступном для детей месте.
7. При работе с инструментом руки должны быть абсолютно сухими.
8. Косметологический аппарат inFace RF необходимо использовать в соответствии с инструкцией.

Не подходит для следующих людей:

1. Людям моложе 18 лет
2. Люди с заболеваниями сердца, ишемической болезнью сердца, заболеваниями щитовидной железы, заболеваниями нервной системы, повышенным кровяным давлением, диабетом, глаукомой, чувствительные к току;
3. Люди, которые в настоящее время болеют или болели раком, особенно раком кожи или предраковыми заболеваниями;
4. Люди, оснащенные электронными устройствами, такими как слуховые аппараты вспомогательные средства, кардиостимуляторы или внутренние дефибрилляторы;

5. Люди с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, такими как заболевания сердца;
6. Беременным женщинам, кормящие грудью или женщинам в период менструации;
7. У людей были опухоли, аномальное заживление ран;
8. Люди, проходящие гормональную терапию;
9. Люди с ослабленной иммунной системой, вызванной иммунодепрессивными заболеваниями, такими как СПИД, или принимающие иммунодепрессанты;
10. После любой операции проконсультируйтесь с врачом;
11. В месте оказания помощи есть какие-либо заболевания, вызываемые теплом, например, рецидивирующий простой вирус герпеса;
12. Есть ли какие-либо кожные заболевания, такие как язвы, мокрота, сыпь и т. д.
13. Если имеются серьезные поражения, гиперплазия рубцов, воспаления и другие местные поражения в месте лечения;
14. Если на месте лечения имеется сильный солнечный ожог;
15. Если в течение трех месяцев проводится лазерное омоложение, химическое омоложение или заживление ран в месте лечения;
16. В месте ухода был временный наполнитель, такой как гиалуроновая кислота и ботулин. Пожалуйста, сначала проконсультируйтесь с врачом;

Примечание: Если у вас есть какие-либо сомнения относительно возможных побочных эффектов, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед использованием

Предостережения


Важно!

1. Не используйте прибор в области щитовидной железы или лимфатических узлов;
2. Не используйте прибор в области горла, глазных яблок, ушей, верхних век, висков;
3. Соблюдайте осторожность при использовании инструмента на участках с тонкой кожей и кровеносными сосудами, таких как уголки глаз, лоб, шея, рот и большеберцовая кость;
4. Людям с чувствительной кожей рекомендуется использовать низкий уровень;
5. В течение часа перед и после использованием прибора не используйте легковоспламеняющиеся жидкие средства по уходу за кожей, такие как спирт, ацетон, духи, дезинфицирующие средства и т. д.;
6. Если вы почувствуете какой-либо дискомфорт во время использования, немедленно прекратите и обратитесь к врачу;
7. Не чистите прибор мокрой тканью или жидкостью, аккуратно протрите его мягкой, сухой, безворсовой хлопчатобумажной тканью или спиртовым тампоном;
8. При работе с инструментом стержень должен плотно прилегать к коже;
9. Можно выбирать различные режимы работы, более высокий режим обеспечивает более высокую мощность и лучший эффект. Выберите соответствующее положение в соответствии с температурной переносимостью вашей кожи.
10. Гель следует использовать в месте ухода. Использование прибора на сухой коже напрямую может привести к ожогам кожи. Постоянно добавляйте гель во время операции. Если геля на коже недостаточно, эффект уменьшится;
11. После процедуры рекомендуется умыться холодной водой;
12. Перед процедурой снимите контактные линзы, металлические украшения и зубные протезы;
13. Не храните и не используйте прибор в местах с сильными магнитными полями и электрическими волнами, в местах с высокой влажностью и пылью, таких как ванны комнаты и кухни, или в местах с высокой температурой. Хранение прибора при экстремальных температурах и условиях может привести к повреждению материала корпуса устройства и сокращению срока ее службы;
14. Не ударяйте, не стучите и не хлопайте по инструменту;

15. После использования, пожалуйста, вовремя очищайте прибор. При очистке прибора сначала отключите питание. Для очистки прибора рекомендуется использовать спиртовую вату, не используйте органические растворители, такие как бензин или разбавители.

Аксессуары и внешний вид продукта

В упаковке должны находиться следующие предметы:

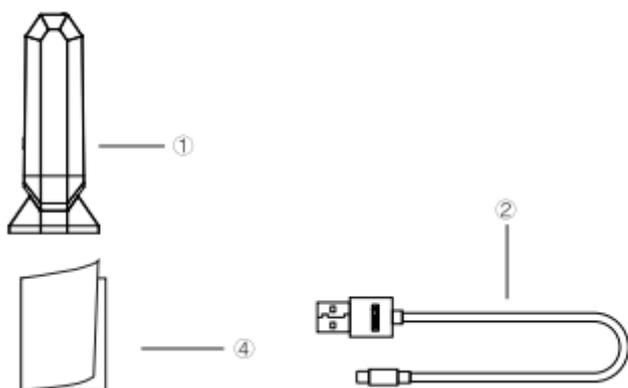

- 1 Прибор
- 2 Кабель для зарядки
- 4 Руководство пользователя и гарантийный талон

Технические характеристики

Название продукта	inFace RF косметический прибор
Модель продукта	MC6000
Размер продукта	154мм x 63мм x 39мм
Вес нетто Емкость аккумулятора	Около 125 г 1500 мАч
Рабочее напряжение	3,7 В постоянного тока
Рабочий ток	DC3.7V_1000 мА
Номинальная мощность	8 Вт
Ток в режиме ожидания	<3 мкА
Рабочая частота	1М Гц
Режим зарядки	USB постоянного тока 5 В
Зарядный ток	600 мА
Время зарядки	Около 2,5 часов
Продолжительность непрерывной работы	<60 минут

Диапазон рабочих температур	0°C~40°C
Материал/ингредиент	Титановая головка, ABS, PC, силикон

Метод работы:


1. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 1,5 секунд, чтобы включить устройство со звуковым сигналом.
2. Короткое нажатие для переключения трех уровней крепости (высокий-средний-низкий) со звуковым сигналом и белым светодиодным индикатором.
3. Во включенном состоянии нажмите и удерживайте кнопку в течение 1,5 секунд, чтобы выключить устройство, раздастся звуковой сигнал.
4. Благодаря интеллектуальной функции синхронизации прибор может автоматически выключается через 10 минут после включения.
5. Если прибор включен и титановые головки не касаются кожи в течение 10 секунд, три светодиода будут мигать в течение 30 секунд, а затем прибор автоматически выключится.
6. Благодаря функции автоматической памяти прибор может автоматически сохранять последний уровень использования в качестве значения по умолчанию для следующего запуска.



Использование:

1. Перед использованием прибора очистите лицо.
2. Следует использовать гель с RF Beauty Instrument. Перед использованием место обработки следует покрыть гелем. Не используйте прибор непосредственно на сухой коже.
3. Держите устройство в тесном контакте с кожей и скользите им с постоянной скоростью, в это время вы почувствуете выход тепла в глубину кожи. Чем медленнее скорость скольжения, тем сильнее ощущение тепла. Вы можете регулировать скорость скольжения в соответствии со своими ощущениями. Во время операции держите шесть контактов в контакте с кожей одновременно. Следуйте принципу движения снизу вверх, изнутри наружу. Скользите головкой шеста по кругу по лицу, повторите 5 раз.
4. Можно выбрать три различных уровня, переключайте их в соответствии с приспособляемостью вашей кожи. Более высокая мощность приводит к лучшему эффекту.
5. После ухода тщательно смойте остатки геля с лица.
6. После обработки высокой температурой нижний слой кожи необходимо успокоить и размягчить. Рекомендуется использовать увлажняющую маску и уделять внимание ежедневной защите от солнца.

Использование:

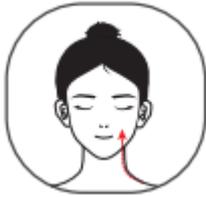

Двигаясь от верхнего края ключицы к нижнему краю нижней челюсти (избегая горла)



Круговые движения от нижней челюсти до уха



Круговые движения от уголка рта к передней части уха.



Круговые движения от носа к скулам (избегайте висков)



Скользя от внутреннего уголка глаза к внешнему уголку глаза и приподнимая кончик глаза, конец брови (избегая глазного яблока и верхнего века)



волос

Поднятие уголка глаза от нижнего века до брови, вдоль линии роста



Вытягивание от бровей к линии роста волос

Частота использования:


1. Для светлой зрелой кожи рекомендуется использовать один раз в 3-4 дня.
2. Для зрелой, сухой и стареющей кожи рекомендуется использовать один раз в 1-2 дня.
3. Для ежедневного ухода за кожей хорошего качества рекомендуется использовать один раз в 1-2 недели.

Метод очистки:

Нажмите и удерживайте кнопку в течение 1,5 секунд, чтобы выключить прибор и протереть его спиртовой ватой или мягкой тканью.

Способ зарядки:

1. Подключите прилагаемый USB-кабель к стандартному адаптеру мобильного телефона (DC 5 В) и порту micro USB устройства для зарядки.
2. Один звуковой сигнал указывает на переход в состояние зарядки, а белый светодиод загорается и мигает.
3. Когда аккумулятор полностью заряжен, всегда горят три белых светодиода, а после отсоединения кабеля зарядки белые светодиоды гаснут.
4. Во время зарядки кнопки не действуют.

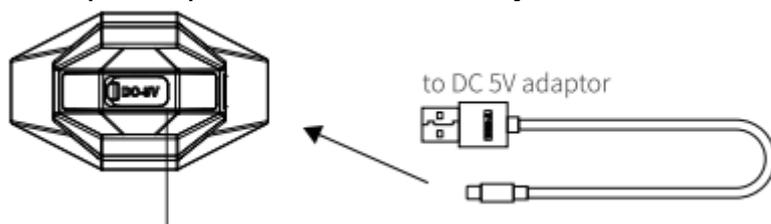

Методы предостережения:

1. Если изделие не используется в течение длительного времени, протрите его и храните в сухом и проветриваемом месте.
2. В случае опасности не допускайте контакта детей с изделием.

Вопросы:

Если вы обнаружите какие-либо проблемы во время использования, пожалуйста, проверьте отклонения в соответствии со следующей таблицей. Если вы не можете решить проблемы, обратитесь в службу послепродажного обслуживания.

Случай	Решение
Чувствуете жжение после использования инструмента	Перед началом работы с инструментом необходимо использовать гель для контакта инструмента с кожей. Без геля вы почувствуете явное покалывание, что окажет негативное воздействие на вашу кожу. Существует три уровня интенсивности, низкий уровень рекомендуется для первого раза. Для последующей операции вы можете переключать уровни в соответствии с состоянием вашей кожи.
Кожа краснеет и немного опухла после использования прибора.	Радиочастотный прибор создает магнитное поле на коже с помощью высокочастотного импульсного тока радиочастот, который проникает в слой дермы, генерирует тепло и способствует реорганизации и регенерации коллагена, когда тепловая энергия дермальной ткани достигает 45°C -50°C. Нормальным явлением является покраснение и легкая припухлость кожи после использования

	прибора, которые проходят в течение 30-60 минут.
Автоматически отключается через 10 минут использования	Прибор оснащен 10-минутной функцией интеллектуальной защиты по времени. Если в течение 10 минут не выполняется никаких действий, прибор автоматически переходит в режим защиты и выключается. Вы можете снова включить прибор, чтобы продолжить использование.
Не удалось включить	Нажмите и удерживайте кнопку в течение 1,5 секунд, чтобы включить или выключить. Если после 1,5 секунд длительного нажатия нет ответа, проверьте, нет ли следующих проблем: 1. Достаточен ли заряд батареи? 2. Во время зарядки светодиодный индикатор работает нормально? 3. Изделие не слишком горячее?
Нет реакции при зарядке	Если прибор не реагирует на зарядку, вы можете устранить неисправность, выполнив следующие действия: 1. Проверьте исправность зарядного адаптера. 2. Нет ли повреждений зарядного кабеля и разъема? 3. Работает ли светодиодный индикатор зарядки?